

SpaceNeb

1969

L'uomo
sbarca
sulla Luna.


OGGI

SpaceNeb
sbarca
sulla Terra.



L'aerosol di domani
nasce oggi.

Since 1966
FLAEM[®]
Medical Devices

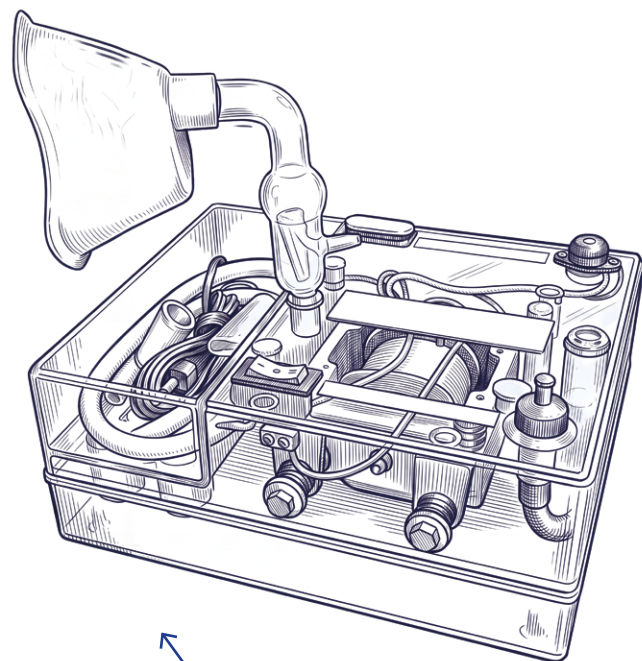


Anni '60

Nasce il nostro aerosol a compressore.

Anni 2000

Nasce l'aerosol a membrana (mesh).

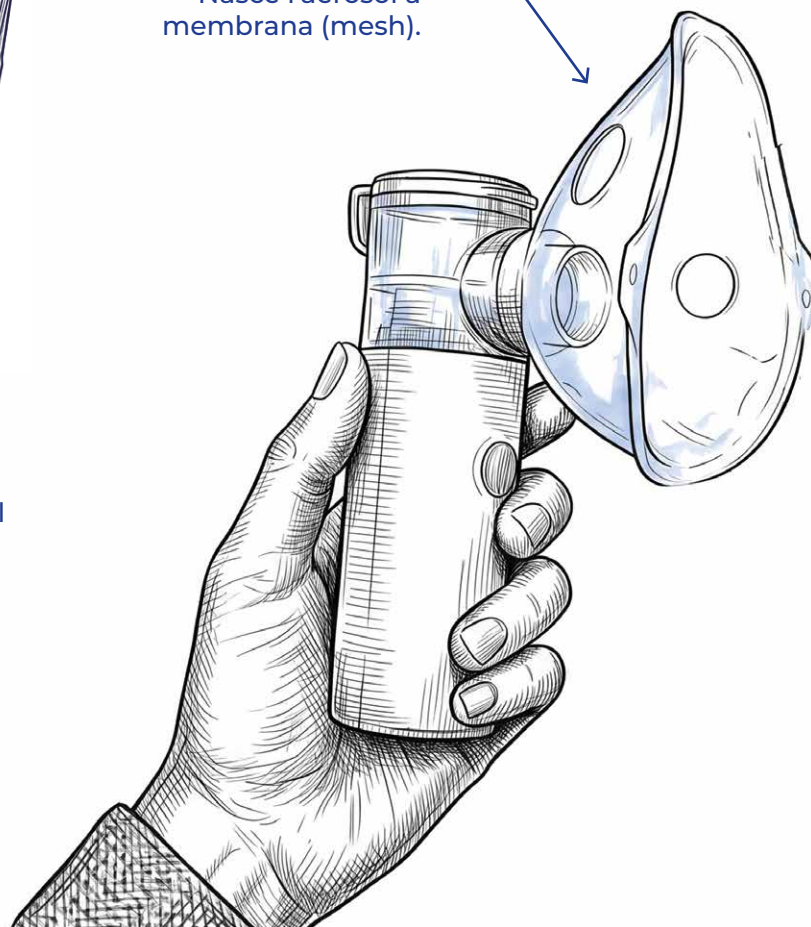

SpaceNeb supera le comuni categorie dell'aerosol, unendo la comodità dei dispositivi portatili all'affidabilità dei nebulizzatori tradizionali. Con 3 brevetti principali, progettato e realizzato in Italia, segna un nuovo traguardo della ricerca applicata di Flaem.


OGGI

Nasce SpaceNeb.



1886

L'automobile
rivoluziona
la mobilità.

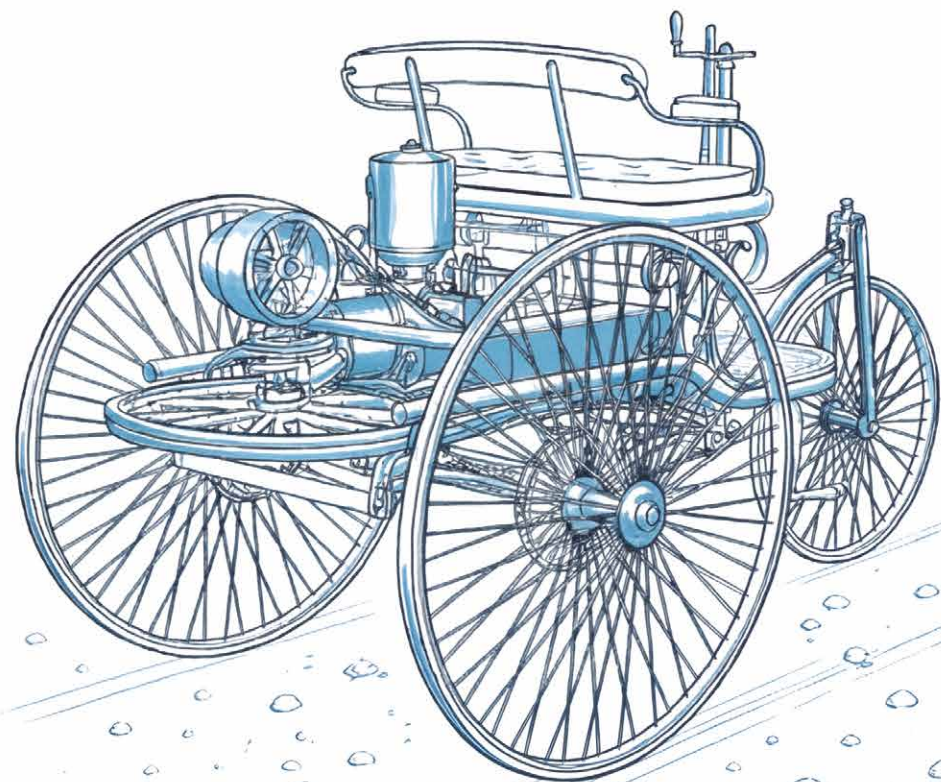

OGGI


SpaceNeb
rivoluziona
l'aerosol.



Un concentrato di tecnologia miniaturizzata portatile,
nato per essere usato ovunque serva e ricaricabile con una
normale presa USB-C. Il dispositivo garantisce fino a 50 minuti
di autonomia con una singola ricarica.

1928

Nasce il
primo
antibiotico.

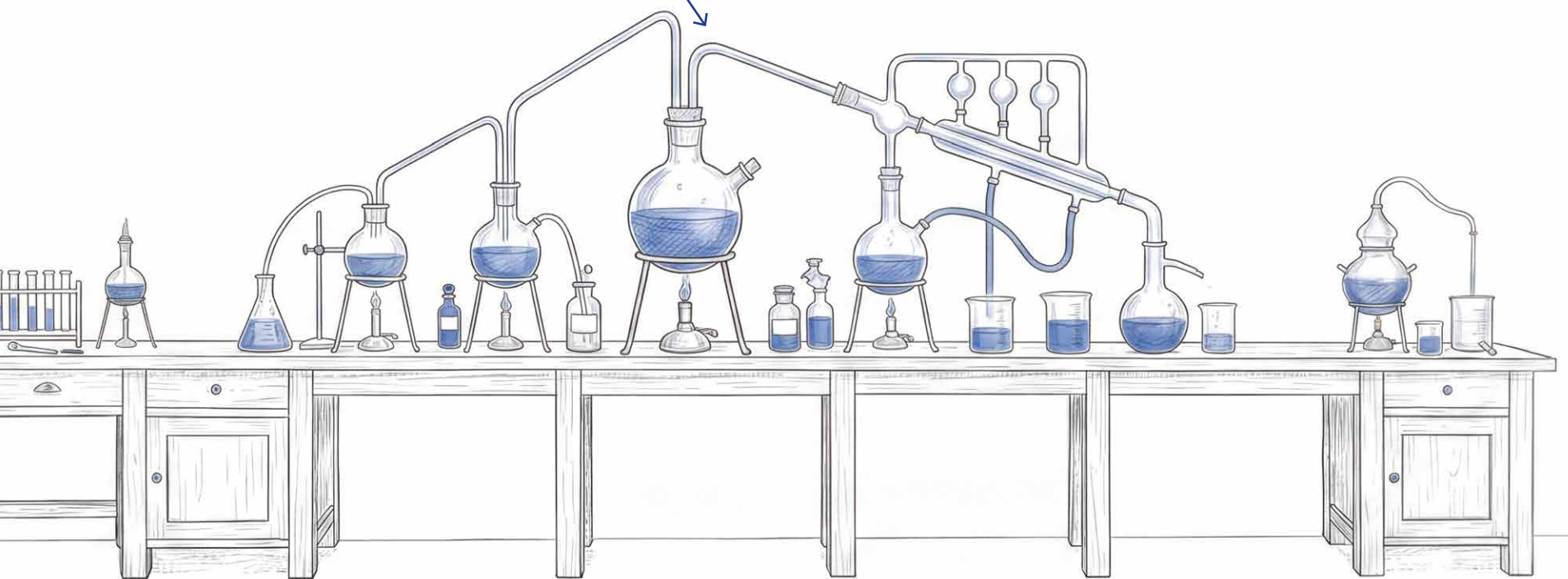

SpaceNeb inaugura una nuova classe di aerosol
portatili, capace di nebulizzare ogni farmaco,
compresi quelli a base oleosa.




OGGI

Nasce un aerosol
portatile e
silenzioso, capace
di nebulizzare ogni
tipo di farmaco.



1967

La scienza
dimostra
l'esistenza
dei quark.

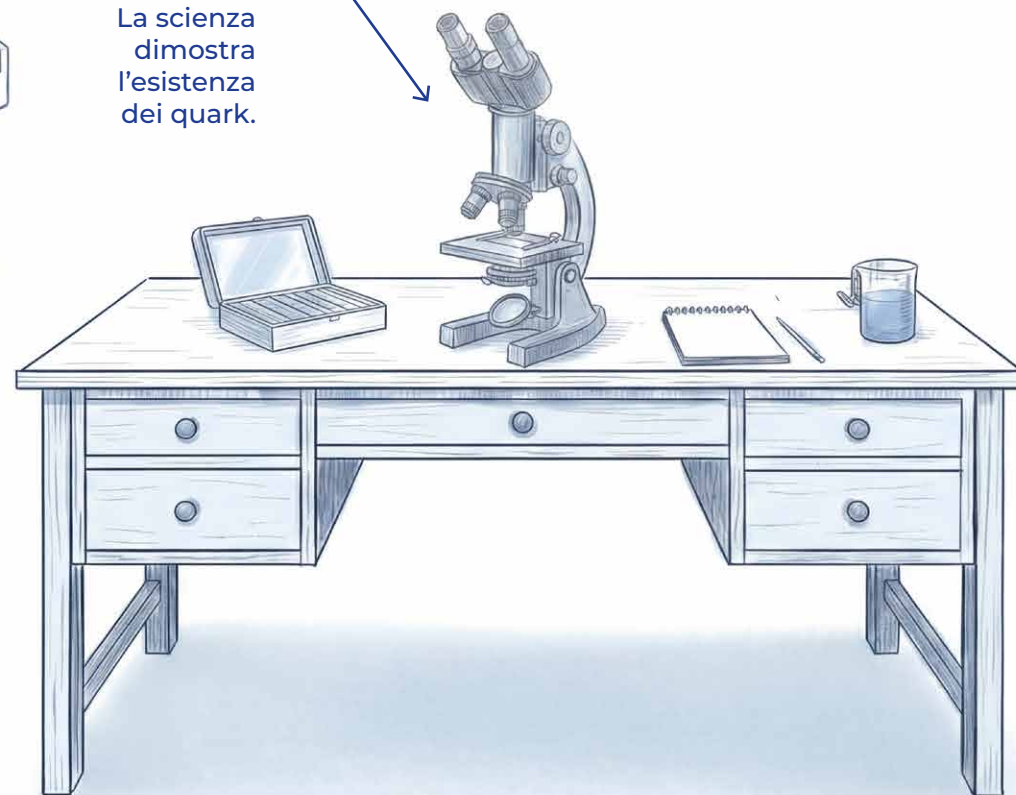


OGGI

Nasce un aerosol
portatile ed
affidabile, senza
compromessi
sulla micronizzazione
delle particelle
e sulla durata del
trattamento.

SpaceNeb è in grado di nebulizzare particelle dai
2,7 ai 4,3 micron con tempi di trattamento confortevoli.
Il tutto grazie alla ricerca Flaem.

1883

Picco di
rumore,
eruzione del
vulcano
Krakatoa.

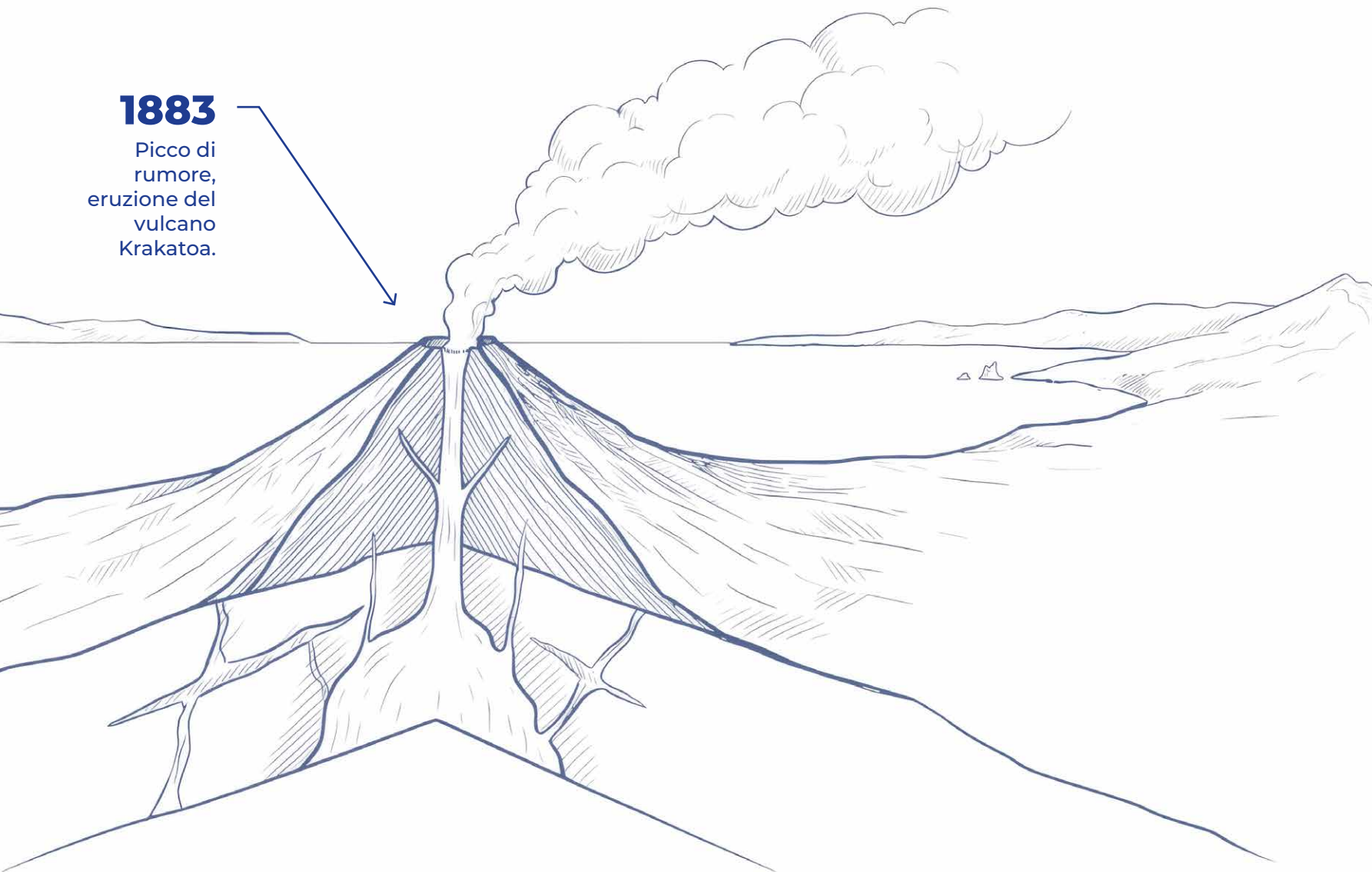

L'affidabile compressore miniaturizzato
di SpaceNeb è al contempo potente e
silenzioso. In questo modo, il dispositivo
aggiunge comfort alla sua estrema
efficacia.

OGGI
Estrema
silenziosità
per un aerosol a
compressore.



Facile da pulire

Il dispositivo e tutte le sue componenti sono semplici da montare, disassemblare e lavare, ancor più degli aerosol a compressore tradizionali.



Pack completo

SpaceNeb è fornito con tubo di 2 metri, ampolla, unità compressore con batterie al litio, due maschere (adulto e pediatrica), boccaglio e cavo USB.



Stessa
efficacia,
più
utilizzi



SpaceNeb può essere utilizzato in due modalità: impugnandolo direttamente per una maggiore libertà di movimento oppure appoggiandolo su un piano e utilizzandolo con l'apposito tubo di collegamento.

In questo modo, SpaceNeb garantisce la massima comodità d'impiego in ogni occasione.



Un aerosol dal cuore tecnologico

SpaceNeb viene fornito con
ampolla RF8 Evo, progettata per
garantire eccellenti standard
di nebulizzazione.



RF8 Evo / Modello: RF8-2E

Caratteristiche tecniche di nebulizzazione

	SENZA SELETTORE DI PARTICELLE	CON SELETTORE DI PARTICELLE
Erogazione ml/min ⁽¹⁾	0,32 ⁽¹⁾	0,23 ⁽¹⁾
MMAD μm ⁽²⁾	4,31 ⁽³⁾	2,75 ⁽²⁾
Frazione respirabile < 5 μm ⁽²⁾	56,7% ⁽³⁾	71,6% ⁽²⁾
Capacità massima	8 ml	

(1) I dati mostrati sono conformi alla procedura interna Flaem. I valori mostrati per l'erogazione di aerosol possono variare a seconda della capacità respiratoria del paziente - (2) Test in vitro eseguiti da TÜV Rheinland Italia S.r.l. in collaborazione con l'Università di Parma. Maggiori dettagli sono disponibili su richiesta
(3) Caratterizzazione eseguita dall'Università di Parma

Conformità



Abbinabile a doccia nasale

**SpaceNeb unisce le performance
di una nuova categoria di aerosol
ai benefici della doccia nasale*
Rhino Clear, con la quale è
facilmente collegabile.**



Rhino Clear® Space / Modello: RC3-1

Caratteristiche tecniche
di nebulizzazione

Tempo di erogazione ⁽¹⁾	2 min approx
MMD ⁽²⁾	> 10 µm
Capacità massima	10 ml

(1) Valori rilevati con lo strumento Malvern Spraytec e riferiti all'utilizzo del lavaggio nasale con soluzione fisiologica di NaCl al 0,9%. Dimensioni delle particelle superiori a 10 µm sono adatte a trattamento delle vie aeree superiori e in particolare alla pulizia e idratazione delle cavità nasali - (2) Valori medi riscontrati con soluzione salina di NaCl allo 0,9% secondo procedura interna Flaem - (3) Caratterizzazione eseguita dall'Università di Parma

Conformità



* La doccia nasale
non è inclusa nella
confezione ed è acquistabile
separatamente





SpaceNeb

